



**PHILIPS**

*Efficia*

Sistema central de  
monitoreo CMS200

# Monitoreo central rentable

Usted se esfuerza en proporcionar atención médica de alta calidad, con un presupuesto establecido, para un gran número de pacientes. Una forma rentable de centralizar su monitoreo puede contribuir de manera significativa en ayudar a su personal a trabajar de forma eficiente. El Sistema central de monitoreo Efficia CMS200 funciona con sus monitores para pacientes Efficia CM Series, Goldway G30E/G40E o SureSigns VM1 para permitir no solo el monitoreo centralizado y un sistema de alarmas, sino también un acceso mejorado a los datos históricos de los pacientes. Hemos diseñado Efficia CMS200 con una funcionalidad fundamental que le permite ofrecer una excelente atención a la vez que logra sus objetivos de costos. Cuando el presupuesto y la calidad importan, la elección es Philips Efficia.


## Principales ventajas

- La interfaz de usuario es fácil de usar y rápida de aprender.
- Confiabilidad a un precio rentable a un bajo costo total de propiedad
- Monitoreo centralizado, alarma secundaria, comunicación bidireccional de configuraciones seleccionadas y revisión de datos, incluidos datos de divulgación completos, para flujos de trabajo eficientes.
- Salida HL7 a sistemas EMR o HIS de terceros.
- Entrada ADT<sup>2</sup>

# Flexible y fácil de usar

Efficia CMS200 le permite mostrar formas de onda, parámetros y alarmas de monitores para pacientes en red para hasta 64 pacientes. Puede configurar el diseño de las páginas y los sectores para facilitar el acceso a la gran cantidad de información a su disposición, ya sea que esté examinando los detalles de cerca o dando un vistazo a distancia.

Además de ver los datos fisiológicos de un paciente en tiempo real, también puede revisarlos —incluidas todas las formas de onda en plena divulgación— a partir de hasta los diez días anteriores, por ejemplo, para investigar los cambios en su condición.

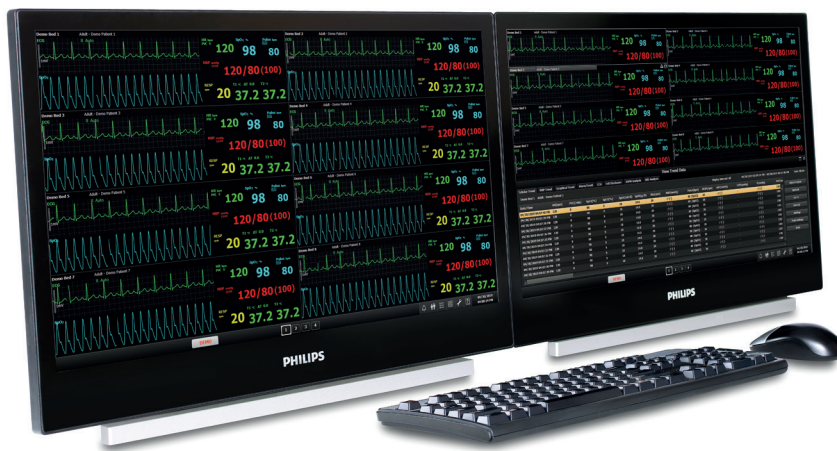

## Fácil de configurar e instalar

Efficia CMS200 cuenta con todo lo que necesita (incluidos teclado, mouse, altavoz y conmutador de red) para conectarse a su red de monitoreo de pacientes y comenzar a funcionar de inmediato. El funcionamiento fácil de entender y las Instrucciones de uso integradas pueden ahorrarle tiempo de capacitación.

## Mejore sus capacidades de gestión de alarmas

Efficia CMS200 es un dispositivo de alarma secundario que recopila alarmas fisiológicas y técnicas en toda la red, proporciona notificaciones sonoras y visuales, y le da la opción de reconocerlas en la estación central. Además, Efficia CMS200 puede reenviar los datos de control de los monitores en red a su EMR.

## Controle el monitor mediante el acceso remoto

Con Efficia CMS200, usted inicia ciertas funciones en el monitor desde la estación central. Puede compartir datos demográficos de los pacientes, iniciar o detener mediciones de NBP y silenciar alarmas desde la central. Esto le permite enfocarse en proporcionar una atención productiva a sus pacientes lejos de la cabecera de sus camas.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

- <sup>1</sup> Efficia CMS200 funciona con monitores para pacientes Goldway G30E/G40E con revisión de software A.01.05, y con monitores para pacientes SureSigns VM con revisión de software A.03.93 y posteriores.
- <sup>2</sup> Requiere la Solución de Interoperabilidad Empresarial Philips IntelliBridge.

